


SQL Server の入れ替えについて (Windows 7 の場合)

※複数台で使用されている時は、サーバーから作業を行います。

この時、サーバーは①～⑨を、それ以外のパソコンは② 1～4と⑧だけ行ってください。

①バックアップを行う

1. ケアマネっ子を起動する

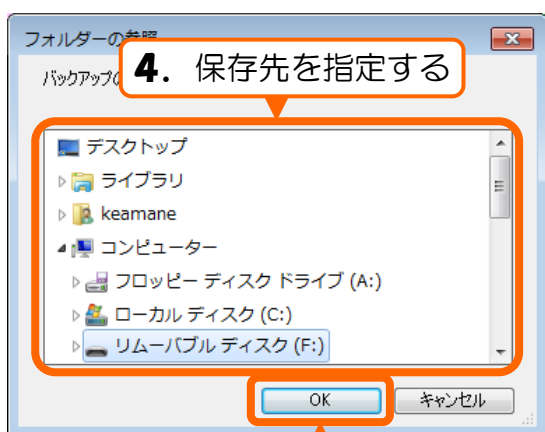

5. 「OK」をクリックする


6. 「バックアップ処理を開始します。よろしいですか？」画面の「はい」をクリックする

7. 「バックアップを完了しました」画面の「OK」をクリックする


8. ケアマネっ子を終了する

②バージョンアップする

1. バージョンアップ CD をパソコンにセットして、CD の内容を表示する

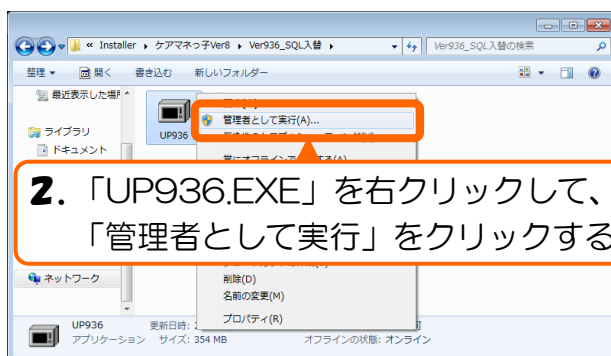

3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示される時は「許可」または「はい」をクリックする

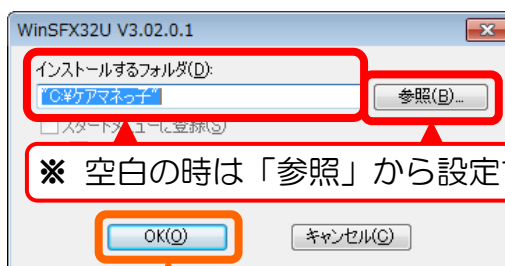


4. 「OK」をクリックする

5. 画面が消えたら、インストール完了


③.NET Framework 4.0 をインストールする

1. 「コンピュータ」を開いて、「ローカルディスク(C:)」→「ケアマネっ子」→「SQL2012」→「dotNetFx40」→「1_dotNetFx40」の順に開く

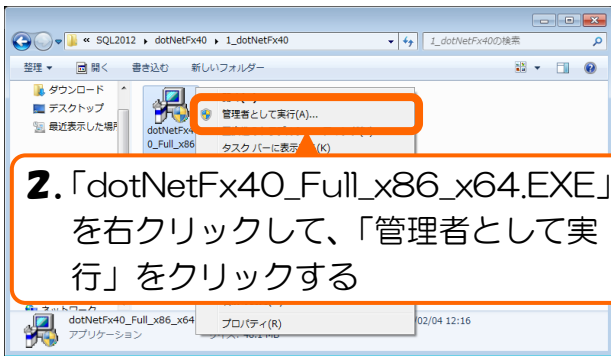

2. 「dotNetFx40_Full_x86_x64.EXE」を右クリックして、「管理者として実行」をクリックする



3. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示される時は「許可」または「はい」をクリックする

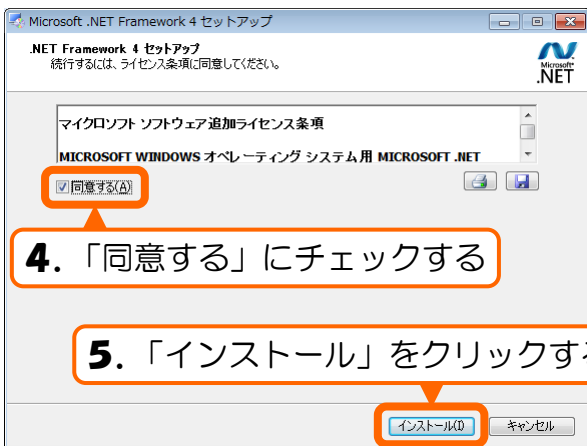


4. 「同意する」にチェックする

5. 「インストール」をクリックする

※ 下のような画面が表示される時は、「閉じる」をクリックして④に進む

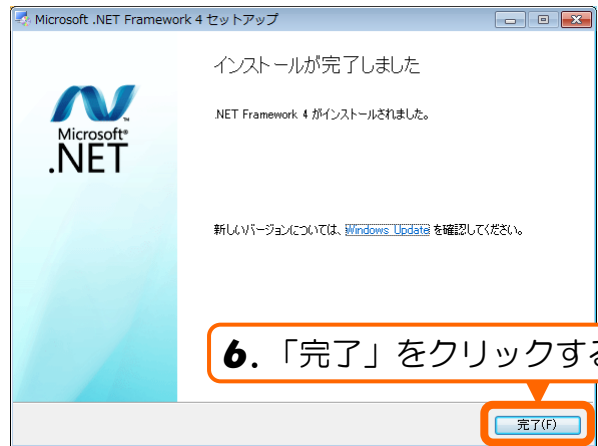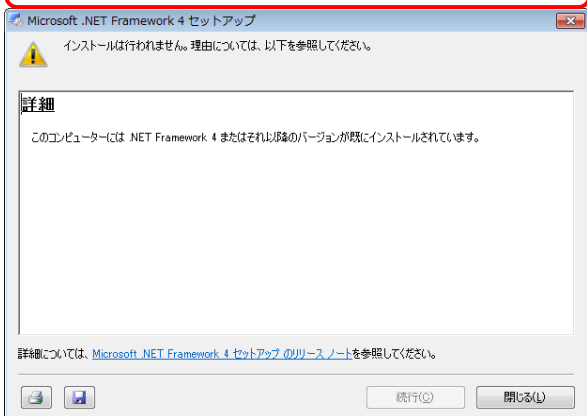


6. 「完了」をクリックする

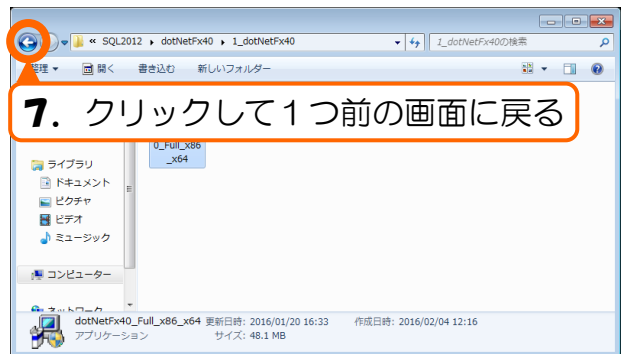


7. クリックして1つ前の画面に戻る

8. 「2_LanguagePack」を開く

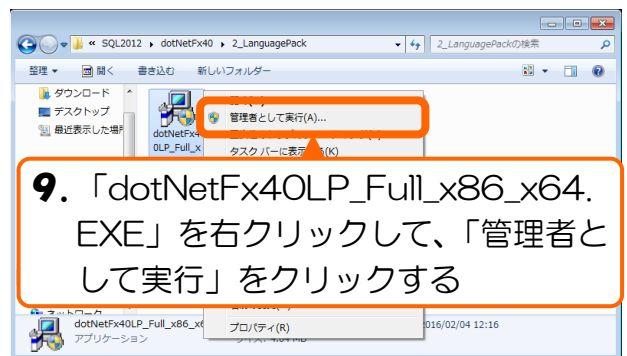


9. 「dotNetFx40LP_Full_x86_x64.EXE」を右クリックして、「管理者として実行」をクリックする

10. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示される時は「許可」または「はい」をクリックする

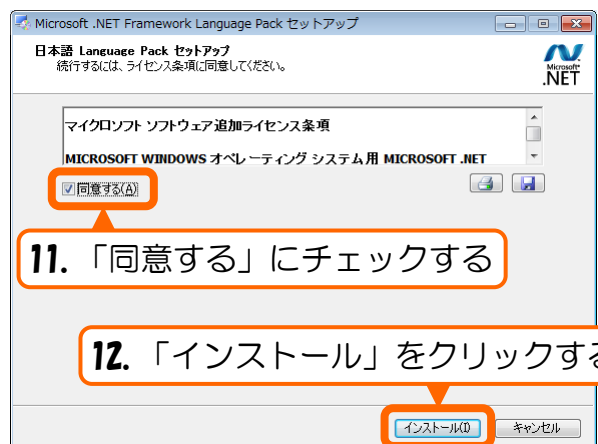

11. 「同意する」にチェックする


12. 「インストール」をクリックする

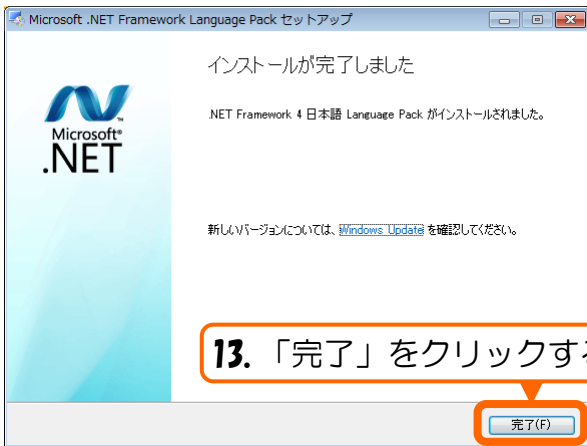

13. 「完了」をクリックする

14. 開いている画面をすべて閉じる

④SQL Server を停止する


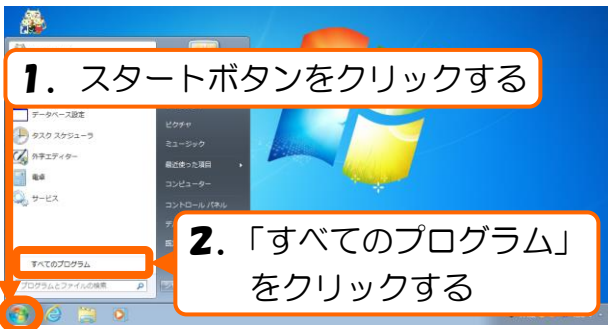




4. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示される時は「許可」または「はい」をクリックする





7. 「SQL Server (KEAMANE8)」の状態が「停止」になったら、「SQL Server Configuration Manager」を閉じる

⑤SQL Server をアンインストールする

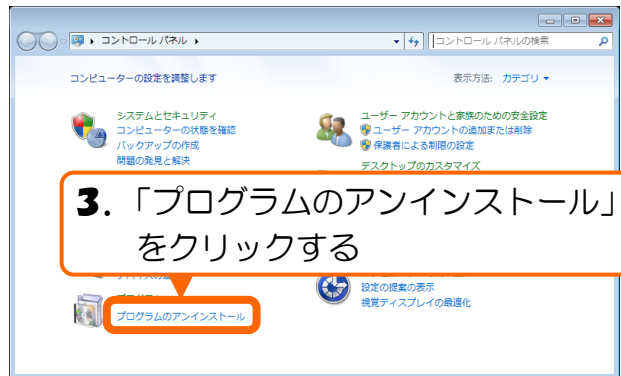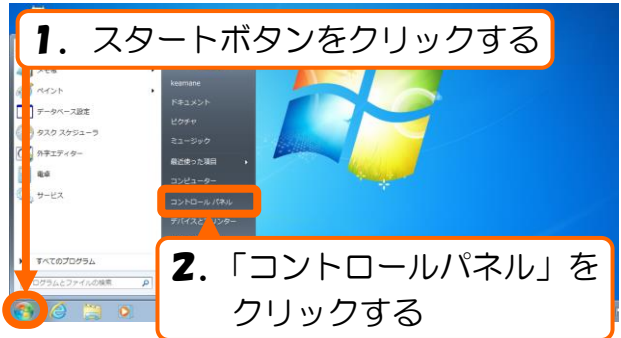

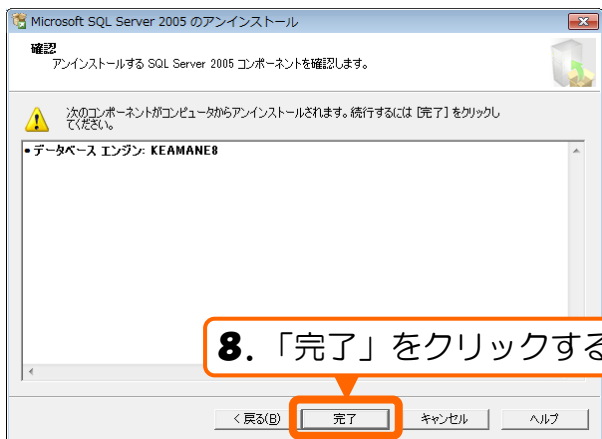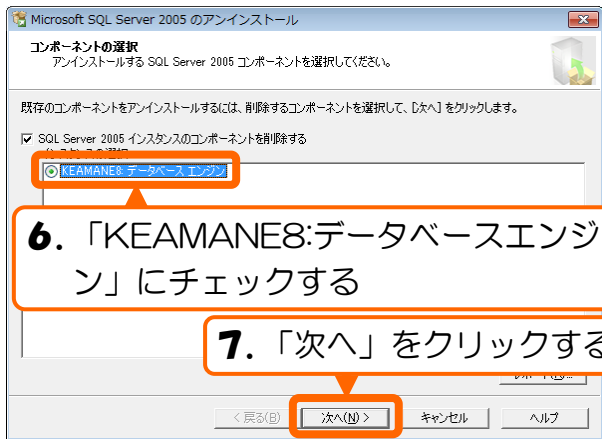

9. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面に戻るまで待つ

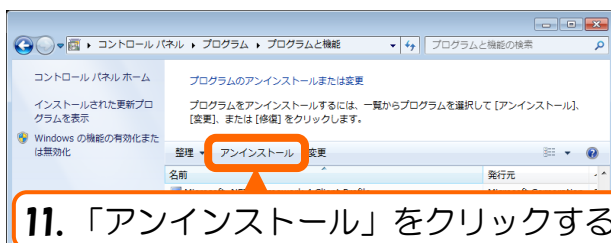
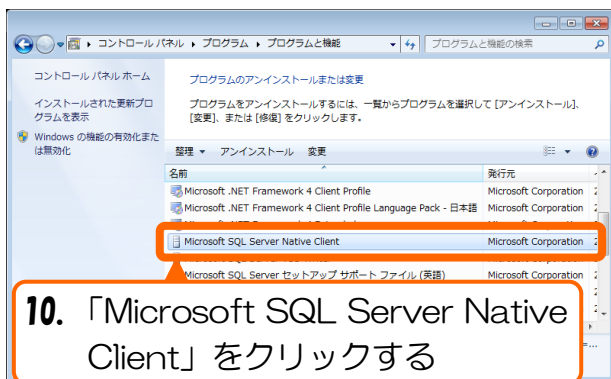


12. 「Microsoft SQL Server Native Client をアンインストールしますか」画面の「はい」をクリックする


13. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示される時は「はい」をクリックする

14. 「プログラムのアンインストールまたは変更」画面に戻ったら、画面を閉じる

⑥データベース設定を開く

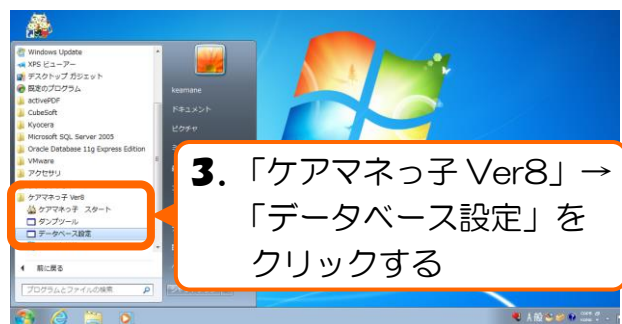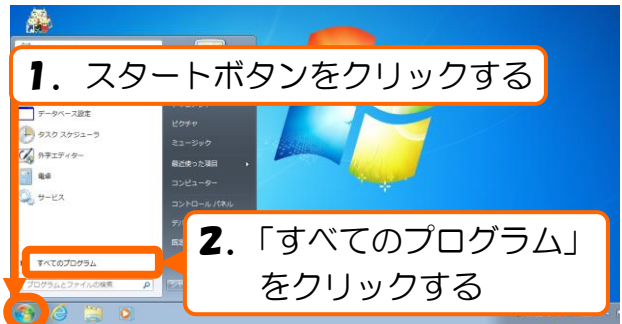


⑦SQL Server をインストールする

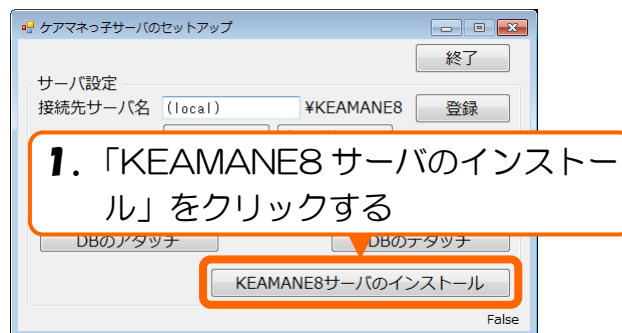


2. 「ユーザーアカウント制御」画面が表示される時は「はい」をクリックする

3. 「SQL Server 2012 セットアップ」画面が消えるまで待つ

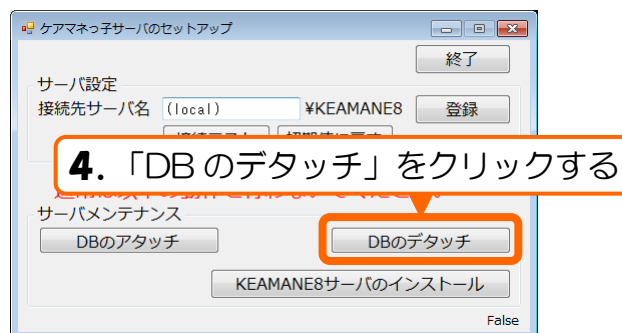


5. 「データベースの切断を行います。」画面の「OK」をクリックする

6. 「デタッチに成功しました。」画面の「OK」をクリックする

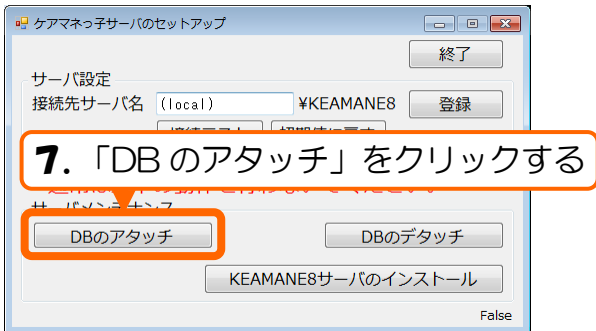

8. 「データベースの接続を行います。」画面の「OK」をクリックする

9. 「アタッチに成功しました。」画面の「OK」をクリックする

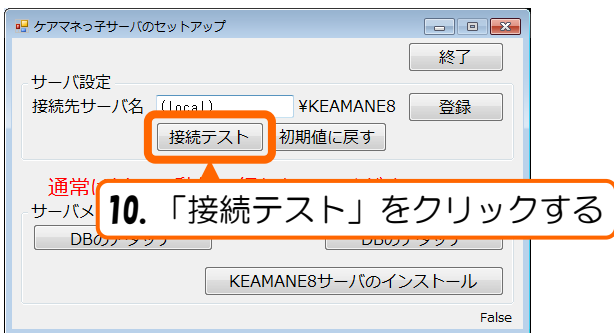

11. 「～への接続に成功しました。」画面の「OK」をクリックする





12. 「終了」をクリックする


⑧ケアマネっ子の起動を確認する

サーバーの場合のみ、次の設定が必要です。


セキュリティソフトをインストールしている場合は、そちらでも同様の設定が必要になります。

⑨SQL Server を例外設定に追加する

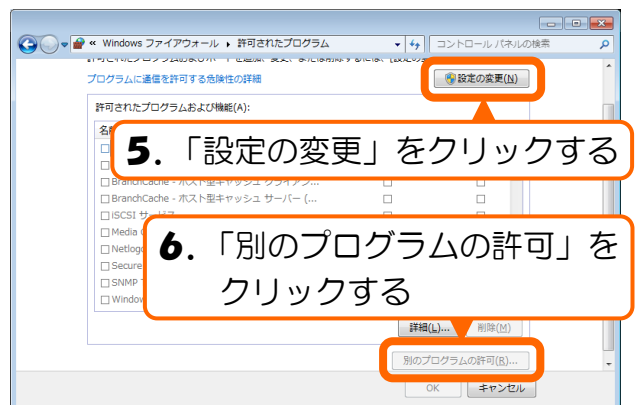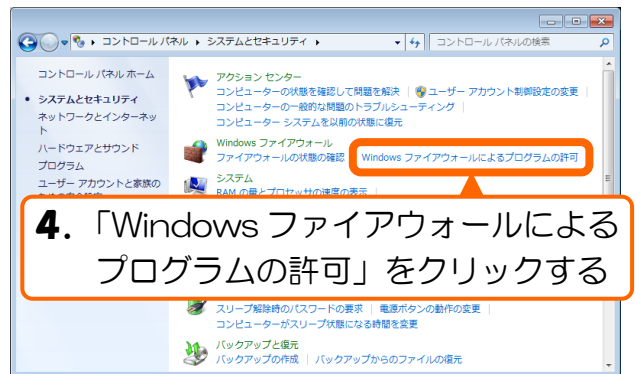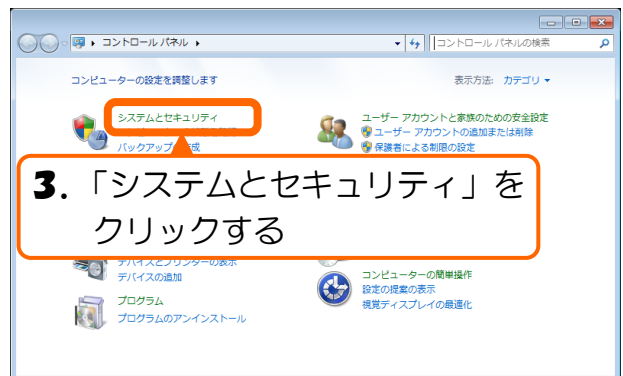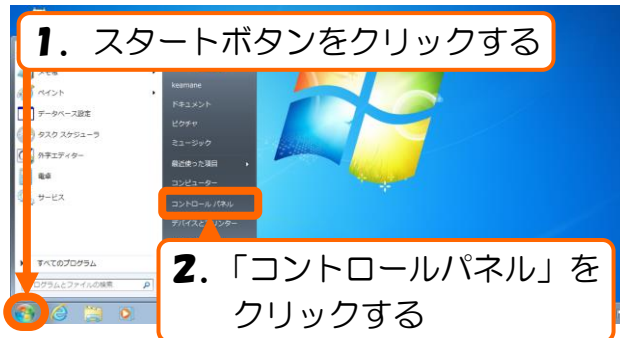


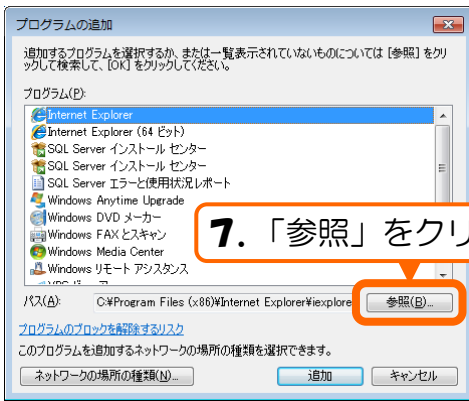


7. 「参照」をクリックする

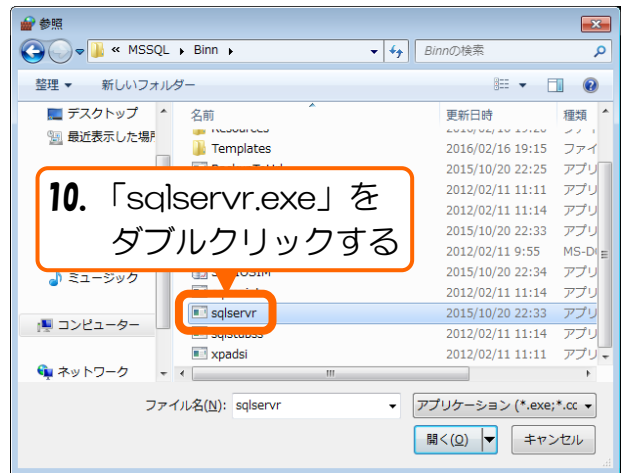


10. 「sqlservr.exe」をダブルクリックする

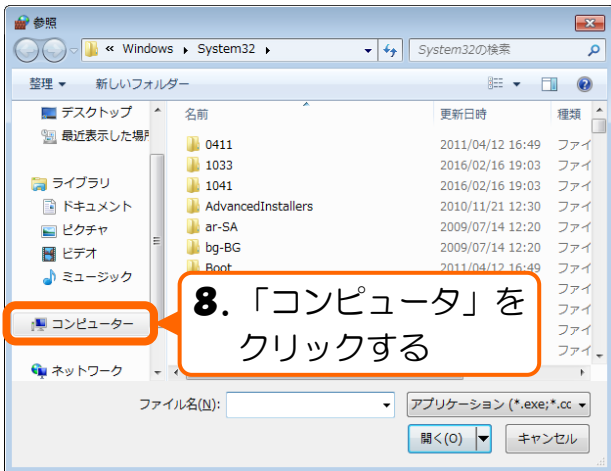

8. 「コンピュータ」をクリックする

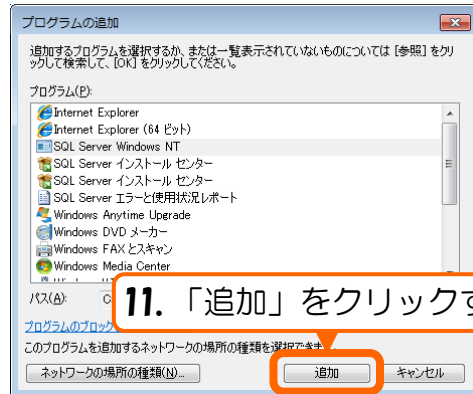

11. 「追加」をクリックする

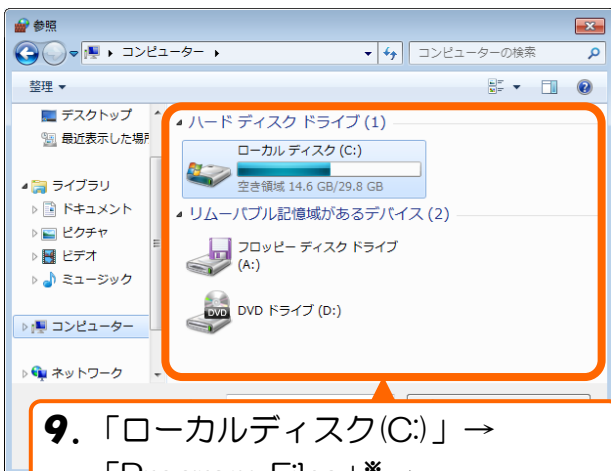

9. 「ローカルディスク(C:)」 → 「Program Files」* → 「Microsoft SQL Server」 → 「MSSQL 11.KEAMANE8」 → 「MSSQL」 → 「Binn」の順に開く

* 64ビットの時は「Program Files (x86)」を開く



12. 「OK」をクリックする

13. コントロールパネルを閉じる